



(5:1)

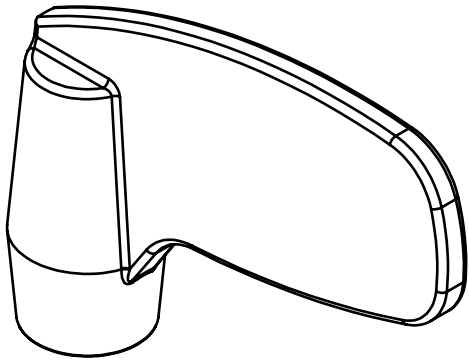

Farbe: RAL 8019 (braun)  
Volumen / volume: 0.126 cm<sup>3</sup>  
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!  
- Werkzeugkonzept absprechen mit Technischem Kontakt Ihde Dental AG

Nicht vermasste Partien durch 3D Daten definiert  
Wandstärke: 0.7mm  
Kanten R0.05...R0.2  
Allgemeiner Anzug / general taper: 1°  
Ganzes Bauteil strichpoliert  
Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!

14K|Dokumentationspflichtige Merkmale

POS	TOLERANZEN	Material	BEMERKUNG
1	TG 3	POM	
Änderungen	- 12.09.2018 mro Initiale Version	- -	Erstellt 03.07.2018 mro
	- -	- -	Geprüft 12.09.2018 mlz
	- -	- -	Freigegeben -
	- -	- -	Auftrags-Nr.
Ohne sep. Stückliste <input type="checkbox"/>		Projekt	Status
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>			Ursprung
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>		Sach- / Artikel-Nr.	Ersatz für
IHDE DENTAL 			Benennung
Dr. Ihde Dental AG CH-8737 Gommiswald			Scanbody 4 Intraoral
			Zeichnungs-Nr. 462071
			Index a